

TEARS
AGAIN®

Tears Again® Hyaluron
Augentropfen
Natriumhyaluronat 1 mg/ml
Ohne Konservierungsmittel

Gebrauchsanweisung
Bitte lesen Sie diese Information sorgfältig durch,
sie dient dazu das Produkt richtig anzuwenden.

Zusammensetzung
Natriumhyaluronat 1 mg/ml, Natriumchlorid,
Kaliumchlorid, Dinatriumhydrogenphosphat
Dodecahydrat, Natriumdihydrogenphosphat
Dihydrat, Magnesiumchlorid Hexahydrat,
Calciumchlorid Dihydrat, Natriumhydrogencarbo-
nat, Aqua purificata

Indikation und klinischer Nutzen
Zur Befeuchtung der Augenoberfläche bei tro-
ckenen, müden, gereizten, überanstrengten oder
brennenden Augen aufgrund des trockenen
Augen Syndroms und Umweltfaktoren (z.B. Me-
dikamente, Umweltverschmutzung, Computer-
nutzung, Klimaanlage, Allergie, Benetzung von
Kontaktlinsen während des Tragens) sowie nach
operativen Eingriffen am Auge.
Tears Again® Hyaluaron macht das Tragen von
Kontaktlinsen angenehmer.

Leistungsmerkmale
Konservierungsmittelfreie wässrige Lösung auf
Basis von Hyaluronsäure und Elektrolyten versorgt
das Auge mit Feuchtigkeit.

- Anwendung**
1. Vor dem ersten Gebrauch Originalitätsverschluss
entfernen (Abb. 1).
 2. Vor jedem Gebrauch die Kappe abnehmen und
nach der Anwendung wieder aufsetzen (Abb. 2).
Vermeiden Sie jeden Kontakt mit der Tropfer-
spitze.
 3. Den Kopf etwas nach hinten neigen und die
Flasche mit der Tropferöffnung senkrecht nach
unten über das Auge halten (Abb. 3).
 4. Das Auge vorsichtig mit Daumen und Zeigefin-
ger öffnen oder das Unterlid leicht nach unten
ziehen (Abb. 4).
 5. Durch leichtes Drücken auf die Mitte der Flasche
werden 1-2 Tropfen auf die Augenoberfläche
oder in den Bindehautsack eingebracht (Abb. 4).

Im Allgemeinen empfiehlt sich eine 4-mal tägliche
Anwendung. Bei stärkeren Beschwerden kann
Tears Again® Hyaluron bedenkenlos häufiger an-
gewendet werden.
Eine Überdosierung ist aufgrund der Anwendungs-
art und der Zusammensetzung nicht möglich.
Tears Again® Hyaluron kann während des Tragens
von harten oder weichen Kontaktlinsen verwendet
werden.

Gegenanzeigen und Vorsichtsmaßnahmen
Nicht anwenden bei einer Überempfindlichkeit
gegenüber einem der Inhaltsstoffe.

Falls Sie zusätzlich Augentropfen/Augensalben
verwenden, sollte ein zeitlicher Abstand von
30 Minuten eingehalten werden.
Für Kinder unzugänglich aufbewahren.
Falls die Beschwerden bestehen bleiben oder sich
verschlechtern, suchen Sie medizinischen Rat.

Nebenwirkungen
In sehr seltenen Fällen kann es zu Überempfind-
lichkeitsreaktionen kommen, die nach Beendigung
der Anwendung rasch und folgenlos abklingen.
Falls eine schwerwiegende, unerwünschte Reakti-
on in Zusammenhang mit diesem Medizinprodukt
auftreten sollte, melden Sie dies bitte dem Herstel-
ler oder der zuständigen Behörde.

Hinweise
Unmittelbar nach der Anwendung kann die Seh-
schärfe kurzfristig beeinträchtigt sein.
Für Erwachsene und Kinder. Kinder sollten bei
der Anwendung von einem Erwachsenen beauf-
sichtigt werden.
In sehr seltenen Fällen wurde von Hornhaut-
kalkifizierungen in Zusammenhang mit der Anwen-
dung von Augentropfen mit erhöhter Phosphat-
konzentration bei Patienten mit erheblich
beschädigter Hornhaut berichtet. Tears Again®
Hyaluron Augentropfen enthalten lediglich
die physiologische Phosphatkonzentration, so
dass Ihre Anwendbarkeit auch bei bestehenden
stärkeren Hornhautstörungen/-schädigungen
grundsätzlich nicht eingeschränkt ist. Sofern zu-
sätzlich weitere Augentropfen-Präparate ange-
wendet werden, sollte in diesem Zusammenhang
aber auf deren Phosphatgehalt geachtet werden,
da insbesondere bei Antiglaukomatosa oder
Antiallergika erhöhte Phosphatkonzentrationen
enthalten sein können.

Haltbarkeit, Aufbewahrung und Entsorgung
Empfohlene Lagerbedingung: Raumtemperatur,
nicht einfrieren.
Nach Anbruch 6 Monate verwendbar.
Nach Ablauf des Verfalldatums nicht mehr
verwenden.
Entsorgung entsprechend lokaler Vorgaben.


Stand der Information: 2025-03

 Optima Pharmazeutische GmbH
Am Söldnermoos 17, DE-85399 Hallbergmoos
optimapharma.de

 Optima Medical Swiss AG
Bundesstr. 7
CH-6300 Zug

 Optima Sanità S.r.l.
Viale della Stazione 5
IT-39100 Bolzano (BZ)

 0482

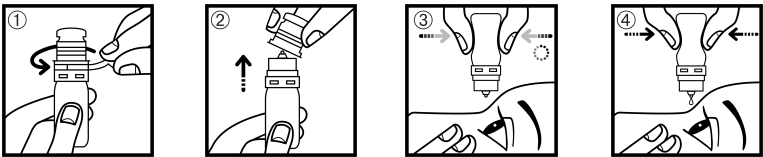

 Hersteller	 Sterilisiert mit aseptischen Verfahren	 Nach Anbruch 6 Monate verwendbar
 Herstellungsdatum (JJJJ-MM: Jahr-Monat)	 Importeur	
 Verfalldatum (JJJJ-MM: Jahr-Monat)	 Gebrauchsanweisung beachten	 Medizinprodukt
 Chargen-Nummer	 Nicht verwenden wenn die Flasche beschädigt ist	 Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft